

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Badbank met rugleuning

Productcode: BathTim



1. Kenmerken

Badbankje met brede zitting en rugleuning is gemaakt van duurzaam PVC-materiaal. Het heeft 14 standen voor hoogteverstelling en armleuningen die het gebruik vergemakkelijken. Speciale rubberen voetjes met zuignappen en antislipvoetjes verminderen effectief de kans op wegglijden op natte oppervlakken, wat zorgt voor betere stabiliteit.

De set bestaat uit: rugleuning van PVC, zitpoten met zuignappen – 2 stuks, poten met antislipdoppen – 2 stuks, bevestigingsbuizen – 2 stuks, armleuning.



1. universele rugleuning van PVC
2. zitting van PVC met afvoeropeningen
3. armleuning
4. hoogteverstelling
5. zuignappen
6. antislipdoppen


2. Toepassing

De badbankjes zijn hulpmiddelen die de gebruiker helpen bij het uitvoeren van hygiënische activiteiten. Het bankje wordt aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, waardoor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zonder hulp wordt bemoeilijkt. Het bankje wordt aanbevolen voor gebruik in de douche, het bad, de badkamer en andere vochtige ruimtes, zowel thuis als in het ziekenhuis.

3. Montage

Stap 1. Draai de zitting om en leg deze plat op de grond. Bevestig de poten een voor een aan beide zijden.

- Poten met zuignappen moeten aan dezelfde kant als de armleuning worden gemonteerd (afbeelding 1).

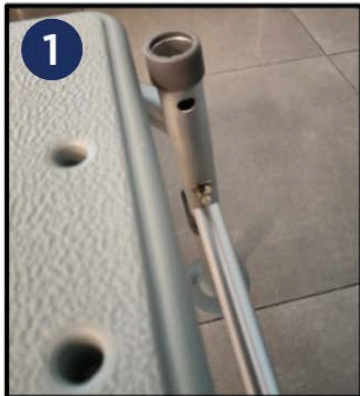

Stap 2. Bevestig de buizen in de openingen van de zitting (afbeelding 2). Zorg ervoor dat beide vergrendelingspennen vergrendeld zijn. Draai het frame met de zitting op zijn kant. Steek het frame van de rugleuning door de openingen aan de achterkant van de zitting totdat de vergrendelingspen vastklikt (afbeelding 3).

- De rugleuning kan in twee standen in lengte worden versteld (afbeelding 3). Druk op de vergrendelingspen en stel de gewenste lengte in.

Stap 3. Zet de bank op de poten en bevestig de armleuning in de openingen (afbeelding 1). Zet de handgreep vast met de vergrendelingspennen.

HOOGTEVERSTELLING

Om de hoogte van de werkbank aan te passen, drukt u op de vergrendelingspen, stelt u de gewenste hoogte in en vergrendelt u deze opnieuw met de pen. De poten zijn in stappen van 1 cm verstelbaar. Alle poten moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

4. Technische gegevens

Afmetingen zitting	67 x 41 cm
Instelbare hoogte	49,5-66 cm
Gewicht	4,70 kg
Max. draagvermogen	136 kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de bank, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig de badbank regelmatig met alleen water, een spons en milde reinigingsmiddelen voor kunststof, zoals zeep. Droog de bank grondig af.
- Gebruik voor het schoonmaken geen: sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Regelmatige inspectie van de rubberen dop, borgpennen, bevestigingsbuizen, rugleuning en zitting wordt aanbevolen.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.









8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing



Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)