

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rollator met 4 wielen en knieondersteuning

Productcode: Knee Walker



1. Kenmerken

De 4-wielige rollator met knieondersteuning is gemaakt van een aluminium frame dat is gecoat met verf met een metallic glans. De rollator is uitgerust met een afneembare tas, voetsteun en knieondersteuning met verstelbare hoogte. Hij heeft een in hoogte verstelbaar stuur met anatomische handgrepen, remmen voor de achterwielen en wielen met een smalle doorsnede van 8 inch in diameter.

De set bestaat uit: opvouwbaar frame, knie-steun, universele voetsteun, voetsteunknop, tas, korte vergrendelknoppen – 3 stuks, lange vergrendelknop – 1 stuk.

Onderdelen van de rollator

- A. Handremmen
- B. Stuur
- C. Knie-steun
- D. Vergrendelknoppen
- E. Remkabel
- F. Lengteverstelling
- G. Voetsteun
- H. Vetknop
- I. Veiligheidsgesp
- J. Tas met reflecterende banden



2. Toepassing

De rollator is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning nodig hebben. Hij wordt ook aanbevolen voor ouderen en mensen met letsel aan de onderste ledematen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het bewegingscomfort te verbeteren en de veiligheid tegen vallen te waarborgen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit van mensen na letsel. Hij garandeert betere stabilisatie, ondersteuning en veiligheid tijdens het bewegen.


LET OP! De rollator mag niet worden gebruikt door mensen met aandoeningen of letsels aan het kniegewricht, omdat er tijdens het gebruik van de rollator veel druk op dat gebied wordt uitgeoefend.

3. Montage

De rollator uit- en inklappen



Deel A



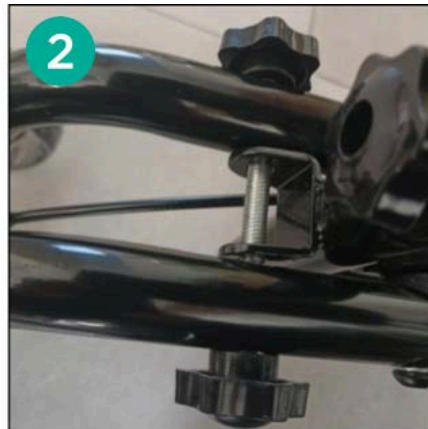


Deel B

- Klap de rollator uit en bevestig deel A in deel B totdat u de vergrendelingspen hoort klikken. Zet het frame vast met de vergrendelingsknoppen.

LET OP! De afstand tussen deel A en B is verstelbaar. Om deze aan te passen, draait u de vergrendelknop los, haalt u deze eruit en drukt u de vergrendelingspen aan beide kanten in, waarbij u het frame op de gewenste lengte instelt. Zet het frame daarna vast met de vergrendelknop.

- Zet de achterwielen vast door de lange vergrendelknop in de opening aan de achterkant van deel B te steken. Een correct gemonteerde vergrendelknop moet door de 4 openingen van deel B gaan (afb. 2). Draai de vergrendelknop vast.
- Duw de stang naar voren totdat de stuurbasis en de rollatorbasis volledig met elkaar zijn verbonden (horizontale positie). Draai de veiligheidsgesp vast (zie afb. 3-5).

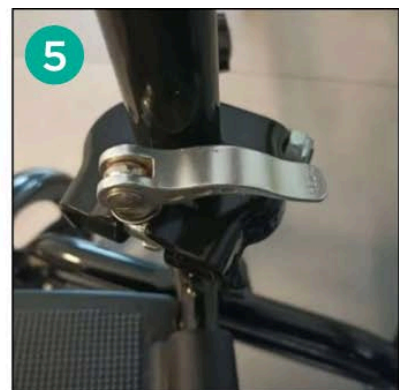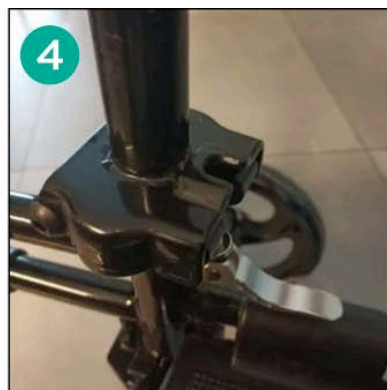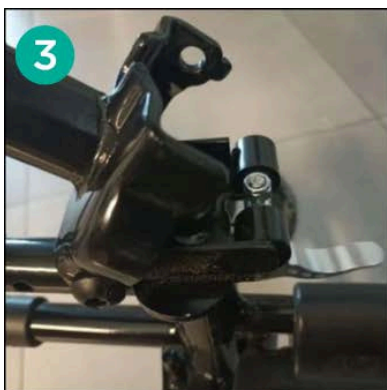

- Zet de duwstang vast door deze naar de juiste lengte omhoog te trekken. Steek de vergrendelingsschroef door de opening aan de voorkant en draai deze vast met de knop aan de andere kant.
- Bevestig de knie-steun in de opening in deel B. Kies de juiste hoogte en zet deze vast met de vergrendelknop.
- Zet de voetsteun vast met de bijgeleverde knop.



- Schuif de tas in de bovenste openingen op een speciale plaat aan de voorkant van de stang. Duw de tas naar beneden om hem op zijn plaats te zetten (afb. 6). Bevestig voor extra veiligheid de klittenbandriem aan de achterkant van de tas rond het frame.

LET OP! Aan de onderkant van de tas bevindt zich een extra inzetstuk van hard materiaal. Gebruik klittenbandriemen om deze vast te zetten.

- Om de rollator in te klappen, herhaalt u de hierboven genoemde handelingen in omgekeerde volgorde. Vergeet niet: verwijder alle vergrendelingsknoppen met schroeven, maak deel A los van deel B, verwijder de knie-steun en klap het stuur in horizontale positie.

LET OP! Zorg er bij het inklappen van de duwstang voor dat u de veiligheidssluiting ontgrendelt en naar de zijkant trekt om de basis van de stang los te maken van het frame.

REMMEN

- Om de rollator tot stilstand te brengen, drukt u tegelijkertijd op beide remhendels.

HOOGTEVERSTELLING VAN DE HANDGREPEN

- Om de hoogte van de handgrepen aan te passen, draait u de vergrendelknoppen aan de buitenkant van het frame los, stelt u de gewenste hoogte in en draait u de vergrendelknoppen vast.

4. Technische gegevens

Totale breedte	44 cm
Afmetingen knie-steun	35 x 18 cm
Totale lengte	84-89 cm
Zithoogte vanaf de grond	45,5-58 cm
Hoogteverstelling handgrepen	89-119 cm
Gewicht	9,6 kg
Max. draagvermogen	136 kg
Kleur frame	zwart

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rollator, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Reiniging

- Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af.
- Gebruik geen sterke polijstmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen.
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klem Schroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiokaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)