

GEBRUIKSAANWIJZING

Aluminium rollator met 4 wielen

Productcode: LORENZA




1. Kenmerken

De vierwielrollator is gemaakt van hoogwaardig aluminium. Hij heeft massieve voorwielen met een diameter van 10" en achterwielen van 7,5", in hoogte verstelbare handgrepen met anatomische grepen, remmen met parkeerfunctie, een zitting met rugleuning en een tas. De constructie is gebaseerd op een kruisframe en buizen met een ovale doorsnede, waardoor de weerstand tegen axiale druk aanzienlijk wordt verhoogd. De weggewerkte remkabel zorgt voor een esthetische uitstraling.

De set bestaat uit: frame met zitting, voor- en achterwielen, rugleuning en boodschappentas.

Elements of the rollator:

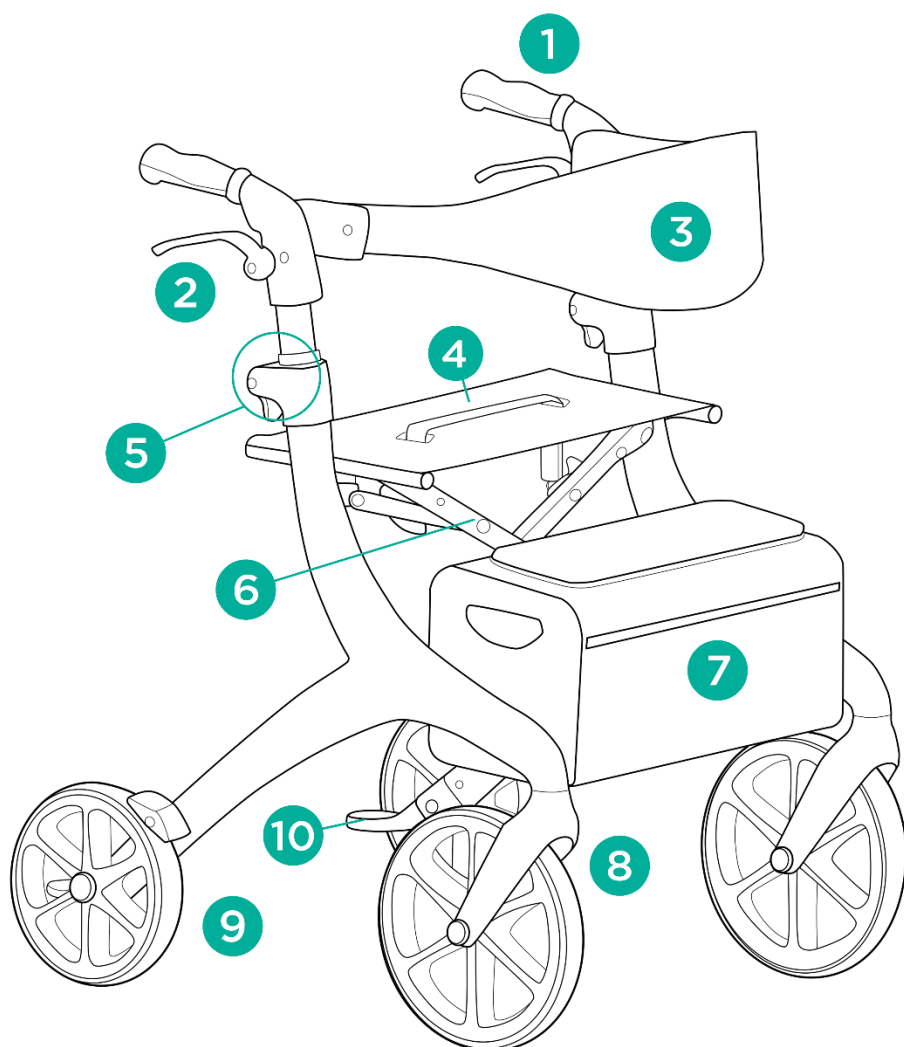

1. Handgreep
2. Remhendel met parkeerfunctie
3. Rugleuning
4. Zitting
5. Vergrendeling hoogteverstelling
6. Dwarsbalk
7. Tas
8. Voorwiel 10"
9. Achterwiel 7,5"
10. Hulppedaal

2. Toepassing

De rollator is bedoeld voor personen met beperkte mobiliteit die tijdens het lopen stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben. Hij wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en vallen te voorkomen. Het gebruik van de rollator bevordert de terugkeer naar activiteit bij personen met mobiliteitsproblemen of problemen met rechtop staan. Hij biedt meer stabiliteit, ondersteuning en veiligheid tijdens het lopen.

3. Montage

Uitklappen

- Pak beide handgrepen vast en trek ze naar buiten om de rollator uit te klappen. Druk de zitting aan beide zijden voorzichtig omlaag totdat de rollator volledig is uitgeklaapt (u hoort een kenmerkende klik).

Inklappen

- Trek de zitting omhoog om de rollator in te klappen.
- Controleer of de rollator correct is ingeklapt.

Hoogteverstelling van de handgrepen

Ga als volgt te werk om de hoogte van de handgreep in te stellen:

- Duw de remhendel omlaag om de parkeerrem in te schakelen en de rollator te blokkeren.
- Klap de verstelhendel omhoog.
- Stel de hoogte van de handgreep in.
- Klem de verstelhendel weer vast om de ingestelde hoogte van de handgrepen te vergrendelen. Trek de handgreep enkele keren omhoog en omlaag om te controleren of deze goed is vergrendeld.
- Stel de hoogte van de tweede handgreep op dezelfde manier in.

LET OP! Beide handgrepen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

Remfunctie

- Trek de remhendel omhoog en houd deze vast om de rollator te stoppen.
- Zet bij stilstand of bij gebruik van de zitting de parkeerrem vast door de remhendel omlaag te duwen.
- Trek de hendel omhoog om de parkeerrem vrij te geven.

Rugleuning en tas verwijderen en bevestigen

De tas en de rugleuning kunnen worden verwijderd.

- Druk op de knop aan de bovenste binnenzijde van het frame en trek de rugleuning omhoog om deze te verwijderen.

- Trek de tas omhoog uit de bevestigingsopeningen aan de onderste binnenzijde van het frame om deze te verwijderen.
- Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de tas en de rugleuning te bevestigen.

Hulppedaal

- Het hulppedaal helpt bij het nemen van obstakels, zoals stoepranden. Druk het pedaal met uw voet omlaag om de rollator op te tillen.

4. Technische gegevens

Afmetingen na inklappen	70 x 15 x 86,5 cm
Totale breedte na uitklappen	58 cm
Totale lengte	87 cm
Zittingbreedte	45 cm
Zithoogte vanaf de grond	55 cm
Hoogteverstelling handgrepen	86,5-96,5 cm
Gewicht rollator	7,70 kg
Maximaal gebruikersgewicht	136 kg
Kleur van het frame	donkerblauw

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de rollator, het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften of gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming.

6. Onderhoud

- Reinig het frame met een vochtige doek en droog het vervolgens grondig af.
- Gebruik geen agressieve polijstmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen.
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende delen van de rollator (scharnieren, klemschroeven en vergrendelingen).

7. Opslag- en transportvoorwaarden

Stel het hulpmiddel niet bloot aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle door ons bedrijf gedistribueerde producten vallen onder een garantie. De voorwaarden daarvan staan beschreven op de garantietaal die op onze website beschikbaar is. Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Bewaar voor garantiedoeleinden het aankoopbewijs (kassabon of factuur).

9. Symbolen

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		Productiedatum
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Let op		Lees de gebruiksaanwijzing
	De fabrikant heeft de conformiteit met de essentiële eisen voor medische hulpmiddelen beoordeeld.		

Ons volledige productassortiment is verkrijgbaar bij onze distributeurs.

Meer informatie: **www.timago.com**.

Bedankt dat u voor Timago hebt gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2026 (II)