

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rollator met 3 wielen

Productcode: RAPID



1. Kenmerken

De aluminium rollator met drie wielen is vervaardigd uit een lichtgewicht, opvouwbaar aluminium frame met een metallic laklaag. Hij is voorzien van in hoogte verstelbare handgrepen met anatomische handvatten en remmen met een parkeerrem. De rollator heeft wielen met een diameter van 20 cm en een tas met ritssluiting.

Onderdelen van de rollator:



1. handgreep
2. rem
3. remkabel
4. handgreepvergrendelingspen
5. tas
6. klittenbandsluiting
7. vergrendelingspen voor poot
8. remafstelling

2. Toepassing

De rollator is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Hij wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid tegen vallen te waarborgen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit van mensen met

problemen bij het lopen en het rechtop staan. Hij garandeert betere stabilisatie, ondersteuning en veiligheid tijdens het lopen.

3. Monteren, in- en uitklappen en afstellen


Montageonderdelen:

1. frame
2. rechter handgreep
3. rechter poot met wiel
4. linker poot met wiel
5. linker handgreep
6. tas
7. klittenbandsluitingen
(2 stuks)



Montage

- Klap het frame uit door beide delen van de dwarsbalk uit elkaar te trekken totdat deze op zijn plaats klikt (afb. 1).
- Steek de linkerpoot in het linkerachterste gat van het frame door de vergrendelingspen van de poot in te drukken (remwiel naar buiten gericht). Vergrendel de pen in het gat van het frame van de rollator.
- De linkerpoot is via een remkabel verbonden met de linkerhandgreep van de rollator. Steek de linkerhandgreep in het linkergat van het frame door de vergrendelingspen van de handgreep in te drukken. Vergrendel de pen in het gat van het frame van de rollator door de gewenste hoogte van de handgreep in te stellen.
- Houd de remkabel aan de buitenkant van het frame en zet deze vast met klittenband (Afb. 2).
- Voer een soortgelijke montage uit voor de rechter achterpoot en de rechterhandgreep.

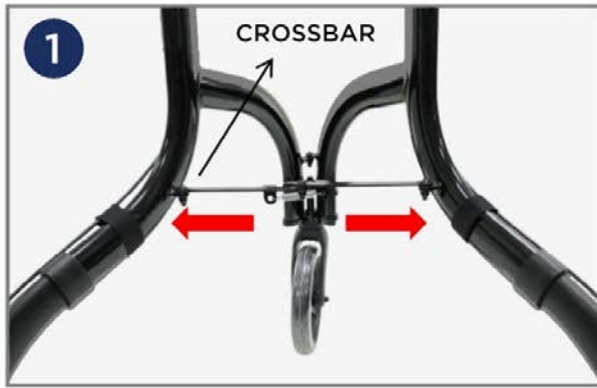

De tas bevestigen

- Steek een van de "T-beugels" aan de zijkant van de tas in de gleuf aan de bovenkant van het hoofdframe (afb. 3). De vakken van de tas moeten aan de achterkant van de rollator worden geplaatst, naar de gebruiker toe.
- Herhaal dit aan de andere kant van de tas.



Remmen

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel omhoog en houdt u deze vast (afb. 4).
- Zet tijdens het stilstaan de parkeerrem vast door de remhendel naar beneden te duwen.
- Om de parkeerrem los te maken, trekt u de remhendel omhoog.

Hoogteverstelling van de handgrepen

- Druk beide remmen in om de parkeermodus in te schakelen en de rollator stil te zetten.
- Houd de vergrendelingspen van de handgreep ingedrukt en stel vervolgens de hoogte van de handgreep af.
- Laat de vergrendelingspen los om de aangepaste hoogte van de handgrepen te vergrendelen. Trek de handgreep enkele keren op en neer om te controleren of de hoogte correct is vergrendeld.
- Stel de hoogte van de tweede handgreep op dezelfde manier in.

Let op! Beide handgrepen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

In- en uitklappen

- Om de gemonteerde rollator in te klappen, verwijdt u de tas en drukt u vervolgens beide delen van de dwarsbalk in en klapt u ze in (afb. 5). Houd vervolgens beide handgrepen van de rollator vast en druk ze naar binnen.
- Om de gemonteerde rollator uit te klappen, houdt u beide handgrepen vast en trekt u ze naar buiten. Klap vervolgens beide delen van de dwarsbalk uit totdat deze op zijn plaats vergrendelt.

Afstellen van de remmen

Gebruik een 10 mm-sleutel om de borgmoer los te draaien. Gebruik vervolgens een 8 mm-sleutel om de remspanning af te stellen (er moet een kleine opening zijn tussen het remmechanisme en het wiel wanneer de remhendel wordt losgelaten). Draai de 10 mm-borgmoer vast – zorg ervoor dat de stelmoer op zijn plaats blijft tijdens het vastdraaien.



4. Technische gegevens

Totale breedte	68,5 cm
Totale lengte	67 cm
Totale hoogte	84–94 cm
Diameter wielen	8"
Gewicht	4,4 kg
Max. draagvermogen	136 kg
Max. zakcapaciteit	5 kg

Kleur frame	zwart
-------------	-------

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rollator, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af. Gebruik geen sterke polijstmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen. Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing



Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)