

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Rolstoel voor ouderen

Productcode: RELAX



1. Kenmerken

De RELAX geriatrie liftstoel biedt comfortabele rust voor ouderen die thuis wonen. De stoel is uitgerust met een dubbele onafhankelijke aandrijving die maximaal gebruikscomfort garandeert dankzij een breed scala aan verstelmogelijkheden. Met de afstandsbediening kan de stoel individueel worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Dankzij de liftfunctie kantelt de stoel naar voren, waardoor het voor een oudere persoon gemakkelijker wordt om zowel op te staan als in de stoel te gaan zitten.

De set bestaat uit: stoel met onderstel, rugleuning, netsnoer met stekker, afstandsbediening.



2. Toepassing


De geriatrie stoel is bedoeld voor mensen met:

- moeilijkheden met zelfstandig lopen,
- mobiliteitsbeperkingen en -beperkingen,
- algemene zwakte als gevolg van hoge leeftijd.

3. Montage, demontage en bediening

VOOR DE MONTAGE

- Zorg ervoor dat de stoel op een vlakke ondergrond staat.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is tussen de stoel, de muur en andere voorwerpen in de kamer.
- Verwijder de bevestigingsbanden waarmee de stoeldraden aan het onderstel zijn vastgezet

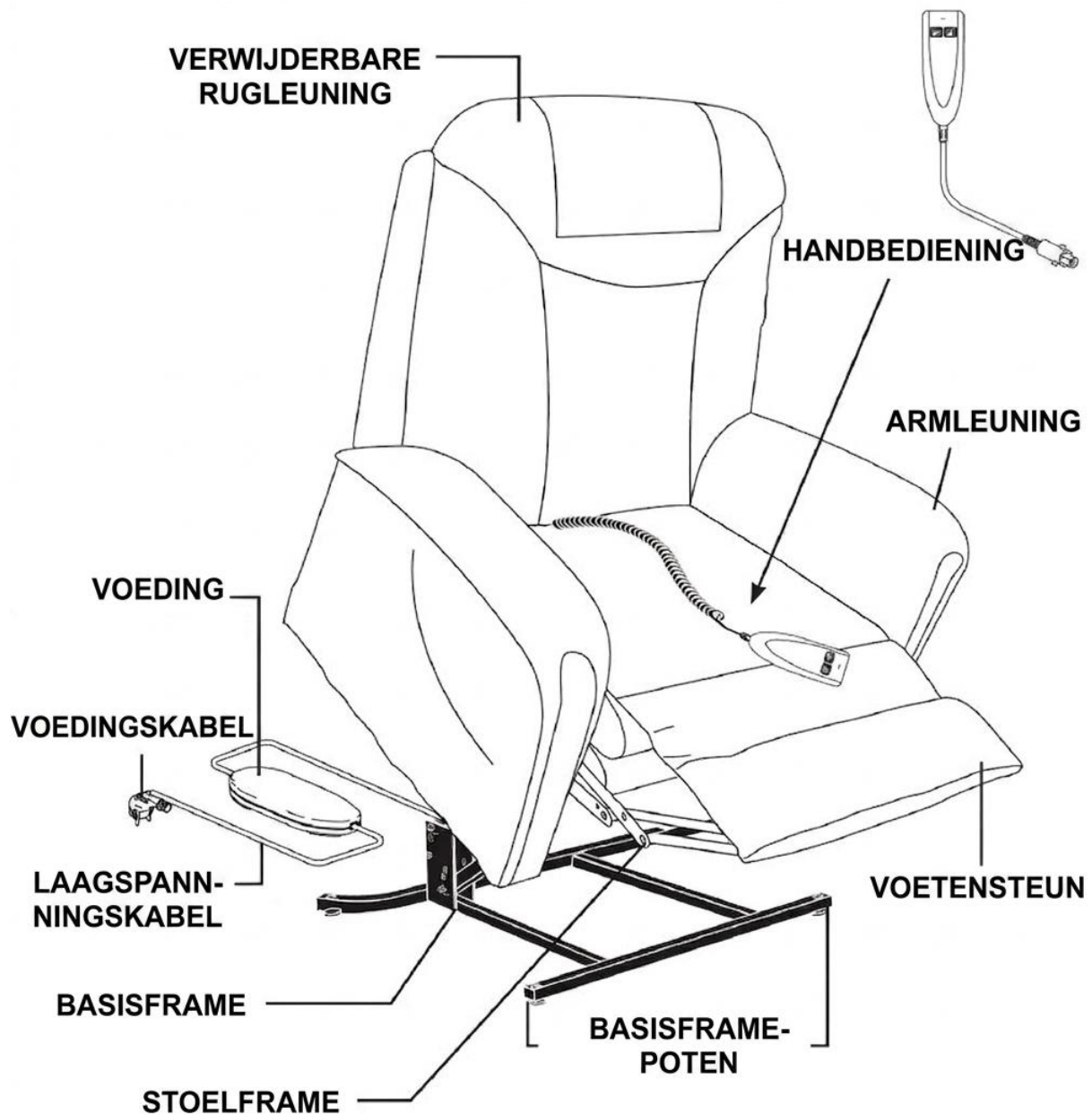

MONTAGE

- De stoel wordt volledig gemonteerd geleverd, met uitzondering van de afneembare rugleuning.
- Bevestig de rugleuning aan de zitting met behulp van de twee bevestigingsrails aan weerszijden van de zitting.
- Druk de rugleuning naar beneden totdat beide bevestigingsrails vastklikken.

- Controleer of de rugleuning stevig vastzit door deze lichtjes omhoog te trekken. Als de rugleuning los aanvoelt, herhaal dan de bovenstaande montagestappen.
- Gebruik de klittenbandriemen aan de voor- en achterzijde om de twee stoffen hoezen vast te maken die de rugleuning met de zitting verbinden.
- Sluit de voedingskabel aan op de aansluiting op het onderstel en vergrendel de aansluiting.
- Sluit de kabel van de handset aan op de aansluiting in het zijvak van de stoel en vergrendel de aansluiting.

DEMONTAGE

- Ontgrendel de vergrendelingen van de aansluitingen en trek de stekkers van zowel de handset als de voedingskabel los.
- Maak beide stoffen hoezen los (klittenbandriemen aan de voor- en achterkant).
- Gebruik geschikt gereedschap om de vergrendelingslipjes op beide montagerails voorzichtig om te buigen en schuif de rugleuning naar buiten.

BEDIENING VAN DE HANDSET

Knop A

Rugleuning naar beneden

Knop B

Rugleuning omhoog

Knop C


Liften - omhoog bewegen van de hele stoel omhoog totdat deze licht kantelt

het gemakkelijker maken om uit de stoel. Als de voetsteunen omhoog staan,

wordt door het indrukken van de knop eerst

de voetensteunen en vervolgens wordt de stoel omhoog.

Knop D

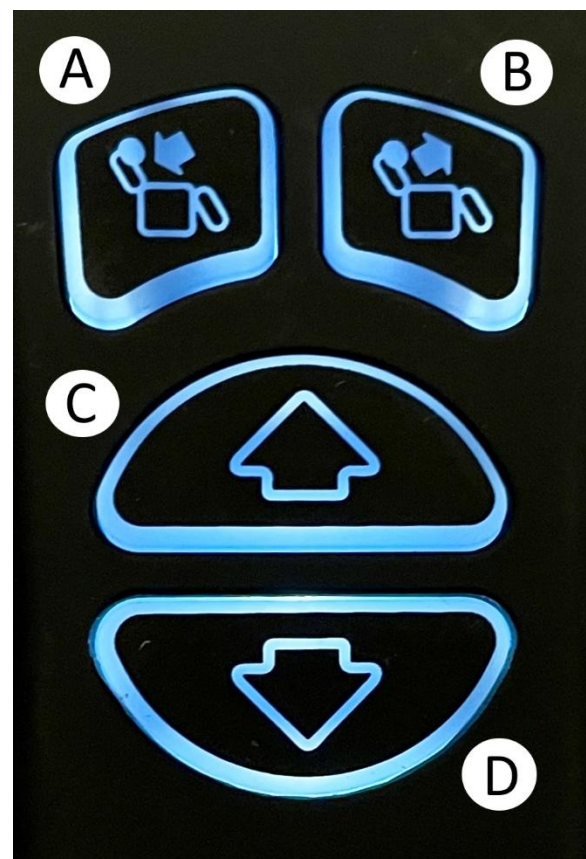


Nivellering - neerwaartse beweging van de gehele stoel.

Nadat de neutrale positie is bereikt, wordt de voetsteun omhoog gebracht door de knop verder in te drukken.

TRANSPORT VAN DE STOEL

De stoel is voorzien van twee achterwielen voor verplaatsing (zie afbeelding hieronder).

Om de stoel te verplaatsen, kantelt u de rugleuning iets naar achteren zodat de stoel op de wielen rust. Verplaats vervolgens de stoel.

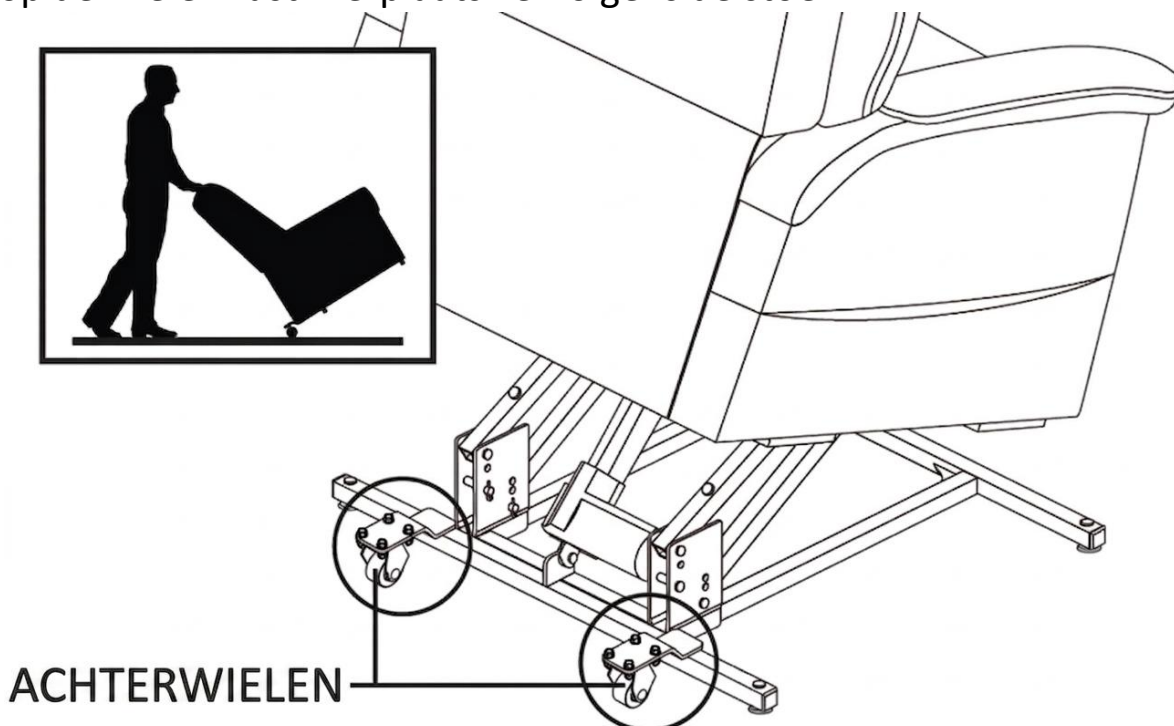

4. Technische gegevens

Totale lengte (zithouding)	85 cm
Totale hoogte (zittende positie)	109 cm
Zitdiepte	43 cm
Hoogte rugleuning	76 cm
Zithoogte (zittende positie)	51,5 cm
Totale breedte	80 cm
Totale hoogte	55 cm
Hoogte armleuning	12,5 cm

Totale lengte (ligstand)	159 cm
Totale hoogte (ligstand)	89 cm
Totale lengte (hefstand)	84 cm
Totale hoogte (hefstand)	129 cm
Hoek rugleuning	141°
Hoek van de voetsteun	89°
Hoek van de stoellift	17°
Gewicht	43 kg
Max. capaciteit	130 kg
Aandrijving	dubbel
Kleur bekleding	Mocca

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

- De stoel is ontworpen voor gebruik binnenshuis.
- Het is verboden om met meer dan één persoon op de stoel te zitten.
- Ga niet op de rugleuning, armleuning of voetsteun van de stoel zitten.
- Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen van het onderstel en het stoelframe.

6. Onderhoud

Reinig de bekleding met een vochtige doek en droog deze vervolgens grondig af. Gebruik geen agressieve desinfectiemiddelen, aangezien dit de stof kan beschadigen. Verwijder vuil van de bewegende onderdelen van het onderstel en het stoelframe.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft

gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)