

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Ronde douchestoel, draaibare zitting, zonder gereedschap

Productcode: TGR-R KP-O 5021




1. Kenmerken

De douchestoel heeft een aluminium frame en een draaibare zitting van duurzaam PVC. Dankzij de in hoogte verstelbare poten kan de stoel worden aangepast aan de lengte van de gebruiker, terwijl antislipdoppen zorgen voor meer stabiliteit en veiligheid. Bovendien is de stoel uitgerust met een Tool-Free (TF)-systeem voor eenvoudige montage.

De set bestaat uit: zitting, basisbuizen (2 stuks), in hoogte verstelbare poten (4 stuks), bevestigingsschroeven (5 stuks).

Onderdelen van de douchestoel:

- A. Zitting
- B. Onderstelbuizen
- C. Hoogteverstelling – borgpen
- D. Antislipdoppen

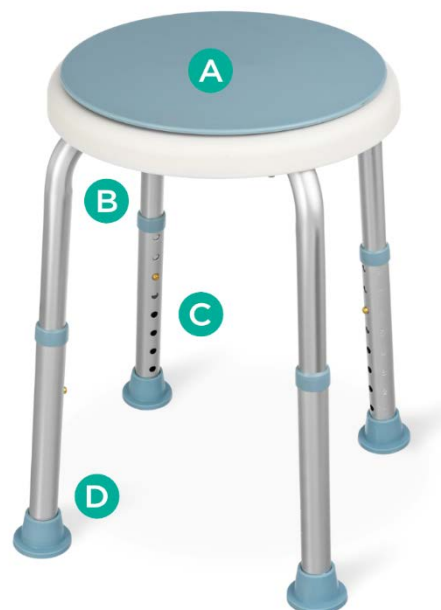

2. Toepassing

De douchestoel is hulpmateriaal dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van hygiënische handelingen. De stoel wordt aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, waardoor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten wordt verhinderd of bemoeilijkt. De stoel kan worden gebruikt onder de douche, in bad, in badkamers en andere vochtige ruimtes thuis en in ziekenhuizen.

3. Montage

Stap 1. Plaats de zitting ondersteboven op een vlakke ondergrond.

Stap 2. Bevestig de gekruiste basisbuizen aan de zitting met vier bevestigingsschroeven met kunststof en metalen ringen. Schroef de vleugelschroef met ringen in het midden vast.

Stap 3. Bevestig de basisbuizen aan de poten.

HOOGTEVERSTELLING

- Om de hoogte van de stoel aan te passen, drukt u op de vergrendelingspen, kiest u de gewenste hoogte van de poot en vergrendelt u deze vervolgens

weer. Herhaal deze stappen voor de andere poten. De poten zijn verstelbaar in stappen van 2,5 cm.

Let **op!** Alle poten moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

4. Technische gegevens

Hoogte	34,5–52 cm
Diameter zitting	32 cm
Gewicht	1,95 kg
Maximaal draagvermogen	110 kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig de douchestoel regelmatig met alleen water, een spons en milde reinigingsmiddelen voor kunststof, zoals zeep. Droog de stoel grondig af.
- **Gebruik** voor het schoonmaken **geen**: sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Controleer minstens eens in de drie maanden de staat van de slangen, de borgschroeven en of de schroeven goed vastzitten.
- Het wordt aanbevolen om de rubberen uiteinden regelmatig te controleren. Vervang de uiteinden door nieuwe als ze versleten zijn.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)